

## LOLLI-TESTUNGEN 2.0: DAS ÄNDERT SICH

Das Lolli-Testverfahren wurde im Sinne aller Beteiligten weiter optimiert, um allen eine sichere Teilnahme am Präsenzunterricht zu ermöglichen.

### Was ändert sich?

- Alle Schülerinnen und Schüler werden zukünftig **an allen Testtagen** neben der Probe für die Pooltestung eine weitere Probe für eine Einzeltestung abgeben.
- Die Probe für die Einzeltestung ist eine sogenannte Rückstellprobe. Sollte es einen positiven Poolbefund geben, werden die zugehörigen Rückstellproben bis 06:00 Uhr am Folgetag der Probenentnahme ausgewertet.
- Es entfällt damit die bisher erfolgte Einzeltestung durch die Erziehungsberechtigten zu Hause und der Transport der Einzelprobe zur Schule.
- Zusätzlich erhalten die Erziehungsberechtigten die Meldung über einen positiven Pool und die Befundergebnisse der Rückstellproben (im Falle eines positiven Pools) direkt von uns per SMS oder per E-Mail.\*
- Durch die Optimierung des Prozesses können nach einem positiven Poolbefund alle negativ getesteten Schülerinnen und Schüler ohne Unterbrechung am Präsenzunterricht teilnehmen.

Zusätzlich stellen wir Ihnen anbei neue Anleitungen zur Verfügung, welche die neuen Abläufe detailliert beschreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.schulministerium.nrw/lolli-tests](http://www.schulministerium.nrw/lolli-tests). Bei Rückfragen erreichen Sie uns per E-Mail ([nrw.schulprojekt@zotzklimas.de](mailto:nrw.schulprojekt@zotzklimas.de)) und Telefon (0174 649 1135).

### Hinweis:

Neben den individualisierten Barcodes erhält jede Schule auch anonymisierte Barcodes.

Nutzen Sie diese bitte, falls ein/e neue/r Schüler/in hinzukommt, Daten falsch hinterlegt sind o. Ä.

In diesem Fall müssen Sie bitte eine Zuordnung der Barcodes vornehmen und sich diese notieren!

\*Voraussetzung: Registrierung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren vollständigen und richtigen Stammdaten und vollständigen und richtigen Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten.


### POOLPROBEN – ABLAUFBESCHREIBUNG UND MATERIALÜBERSICHT

#### ABLAUF

#### MATERIAL

- Nachdem die Kinder 30 Sekunden an dem Pool-PCR-Abstrichtupfer gelutscht haben, fügen Sie
1. alle PCR-Abstrichtupfer aus einer Pooltestung gesammelt in das beiliegende Schraubgefäß und verschließen dieses.

- 1 Pool-PCR-Abstrichtupfer für jedes Kind (verpackt, mit Sollbruchstelle)
- 1 Schraubgefäß pro Pooltestung

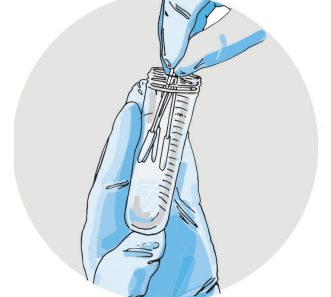

2. Bitte ordnen Sie die Barcodes den entsprechenden Klassen zu.  
Bekleben Sie das Schraubgefäß senkrecht und zentral mit dem mitgelieferten Barcode „Pool-Probe“.  
Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.

- 1 Barcode für das Schraubgefäß pro Pool – „Poolprobe“ (Klassen sind fortlaufend nummeriert)



3. Bitte legen Sie alle Schraubgefäße Ihrer Schule gesammelt in **die mitgelieferte Plastiktüte** und beschriften Sie diese mit dem Namen Ihrer Schule und dem Datum der Pooltestung.  
Legen Sie die Plastiktüte dann in die entsprechende Transportbox.

- 1 Barcode für das Schraubgefäß pro Pool – „Poolprobe“ (Klassen sind fortlaufend nummeriert)
- 1 Plastiktüte für alle Schraubgefäße Ihrer Schule



4. Den Befund des Pools können Sie im **Befundportal** einsehen. Alternativ können Sie den **QR-Code** mit der LABUNIQ-App scannen, um das Ergebnis abzurufen.  
**Im Positivfall** werden Sie und die betroffenen Familien per SMS oder E-Mail direkt benachrichtigt.\*

- 1 QR-Code für die Befundabfrage der Pool-Testung – „Poolbefund“



\*Voraussetzung: Registrierung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren vollständigen und richtigen Stammdaten und vollständigen und richtigen Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten.

# RÜCKSTELLPROBEN – ABLAUFBESCHREIBUNG UND MATERIALÜBERSICHT


## ABLAUF

## MATERIAL

5. Anschließend lutschen die Kinder 30 Sekunden an den Abstrichtupfern für den PCR-Einzeltest. Der Einzel-PCR-Abstrichtupfer kommt zurück in das persönliche Transportröhrchen. Dieses verschließen Sie bitte fest.

**Die Poolzugehörigkeit der Kinder ist vorab definiert.**

- 1 Einzel-PCR-Abstrichtupfer für jedes Kind (im Transportröhrchen)

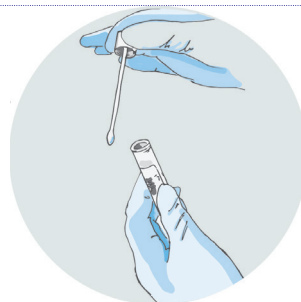

6. Bitte bekleben Sie das Transportröhrchen senkrecht mit dem beigefügten Barcode „Probe-Einzeltestung“. Bitte verkleben Sie **nicht** den Verschluss.

- 1 für jedes Kind individualisiert\* Barcode für das Transportröhrchen – „Einzelprobe“



7. Legen Sie bitte alle beklebten Einzel-PCR-Abstrichtupfer der Kinder eines Pools gesammelt in die mitgelieferte Plastiktüte und beschriften Sie diese mit dem Namen der Schule sowie dem Namen des Pools. Legen Sie die Plastiktüte in die Transportbox – die Transportbox ist nun abholbereit.

- 1 Plastiktüte für alle Einzeltestungen eines Pools



8. Geben Sie den QR-Code „Einzelbefund“ bitte dem entsprechendem Kind mit.

- 1 QR-Code für die Befundabfrage der Einzeltestung – „Einzelbefund“



Im Positivfall des Pools werden umgehend alle zugehörigen Rückstellproben (Einzelproben) getestet.

9. **Die Ergebnisse der Einzeltestungen erhalten Sie und die jeweiligen Erziehungsberechtigten in jedem Fall direkt per SMS oder E-Mail\*.**

Zusätzlich können Sie als Coronabeauftragte/r die Ergebnisse der Einzeltestungen im Befundportal einsehen. Die Erziehungsberechtigten können das Einzeltest-Ergebnis zusätzlich abrufen, indem sie den QR-Code „Einzelbefund“ mit der LABUNIQ-App scannen.

\*Voraussetzung: Registrierung aller Schülerinnen und Schüler mit ihren vollständigen und richtigen Stammdaten und vollständigen und richtigen Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten.